

Pico Flow 2

UNITÀ PORTATILE PER UROFLUSSOMETRIA

PicoFlow2 è un uroflussimetro bicanale avanzato per esami di flusso ed elettromiografia del pavimento pelvico. Grazie alle sue caratteristiche tecniche all'avanguardia, PicoFlow2 è particolarmente indicato per indagini urodinamiche nei reparti di pediatria e uroginecologia, nonché in tutti i contesti in cui si predilige un approccio non invasivo all'esame urodinamico.




Flussometro con
cavo o senza fili



Uroflussometria ed elettromiografia combinate:
il massimo dall'esame urodinamica più semplice

Caratteristiche

- Generazione di nomogrammi SIROKI e LIVERPOOL
- Ampio display touch screen per inserimento dati paziente ed esecuzione esame
- Le curve vengono mostrate in real time sul display con la possibilità di modificare la scala
- 2 canali: 1 uroflussometria (con cavo o senza fili), 1 (opzionale) EMG
- Inizio/fine esame: automatico o manuale
- Stampante termica incorporata
- Post-analisi dell'esame salvato in modalità automatica o manuale
- Software opzionale per refertare su PC

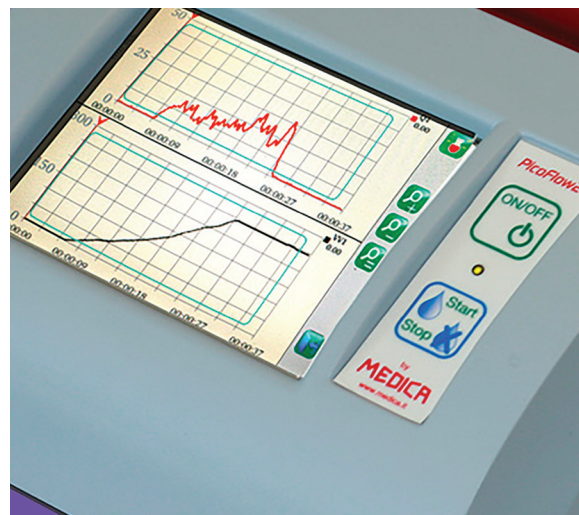

Dati tecnici

PicoFlow2 | cod. MU16

- Display grafico, touch screen, 5.7" a colori, risoluzione 800x600 pixel
- Pulsante Start e Stop per modalità manuale
- Porta USB per il download dell'esame
- Stampante termica incorporata
- Larghezza rotolo carta: 114 mm
- Dimensioni: 110x328x250 mm
- Peso 2.0 Kg
- Memoria Interna 2 GB (oltre 1000 esami)

Uroflussometro

Con Cavo | cod.B89094 + FLAC/SAU

Wireless | cod. MFB40016 + FLAC/BT

- Trasduttore a cella di peso ad alta risoluzione
- Range di misura da 0 a 100 ml/S
- Accuratezza 1% F.S.
- Frequenza di campionamento: 10 Hz
- Convertitore A/D: 16 bit
- Range Volume: 2000 ml
- Incluso stativo, becher e imbuto
- Batteria al litio/alimentatore esterno con circuito di ricarica (configurazione wireless)

Canale EMG | cod. SAU-EMG/LS

- Range: da 0 a 2 mV
- Fondo scala: automatico o manuale
- Frequenza campionamento: 100 Hz
- Convertitore A/D: 16 bit
- Lunghezza cavo 5 m
- Può lavorare con elettrodi di superficie

Configurazione Standard	Codice	Opzionale	Codice
PicoFlow2 unità centrale	MU16	Canale EMG	SAU-EMG/LS
Uroflussometro con cavo	B89094 + FLAC/SAU (accessori)	Elettrodi di superficie (30 pz. per busta)	F9053N
Uroflussometro wireless	MFB40016 + FLAC/BT (accessori)	Sedia Comoda	MCH1

* Le specifiche tecniche possono cambiare senza preavviso

FLOWSOFT2

Pacchetto software per PC. Permette di scaricare gli esami, analizzarli e archivarli

PRODUTTORE

MEDICA S.p.A. Via degli Artigiani, 7 | 41036, Medolla (MO) Italia

Tel: +39 0535 51159 | Fax: +39 0535 52605 | Email: info@medica-spa.com | www.medica-spa.com

MEDICA

SEAMLESS INNOVATION FOR LIFE QUALITY



CE 0476 UNI EN ISO 9001:2015 UNI CEI EN ISO 13485:2021